


LoFric Origo Pro – korte handleiding

Wellspect®
A REAL DIFFERENCE

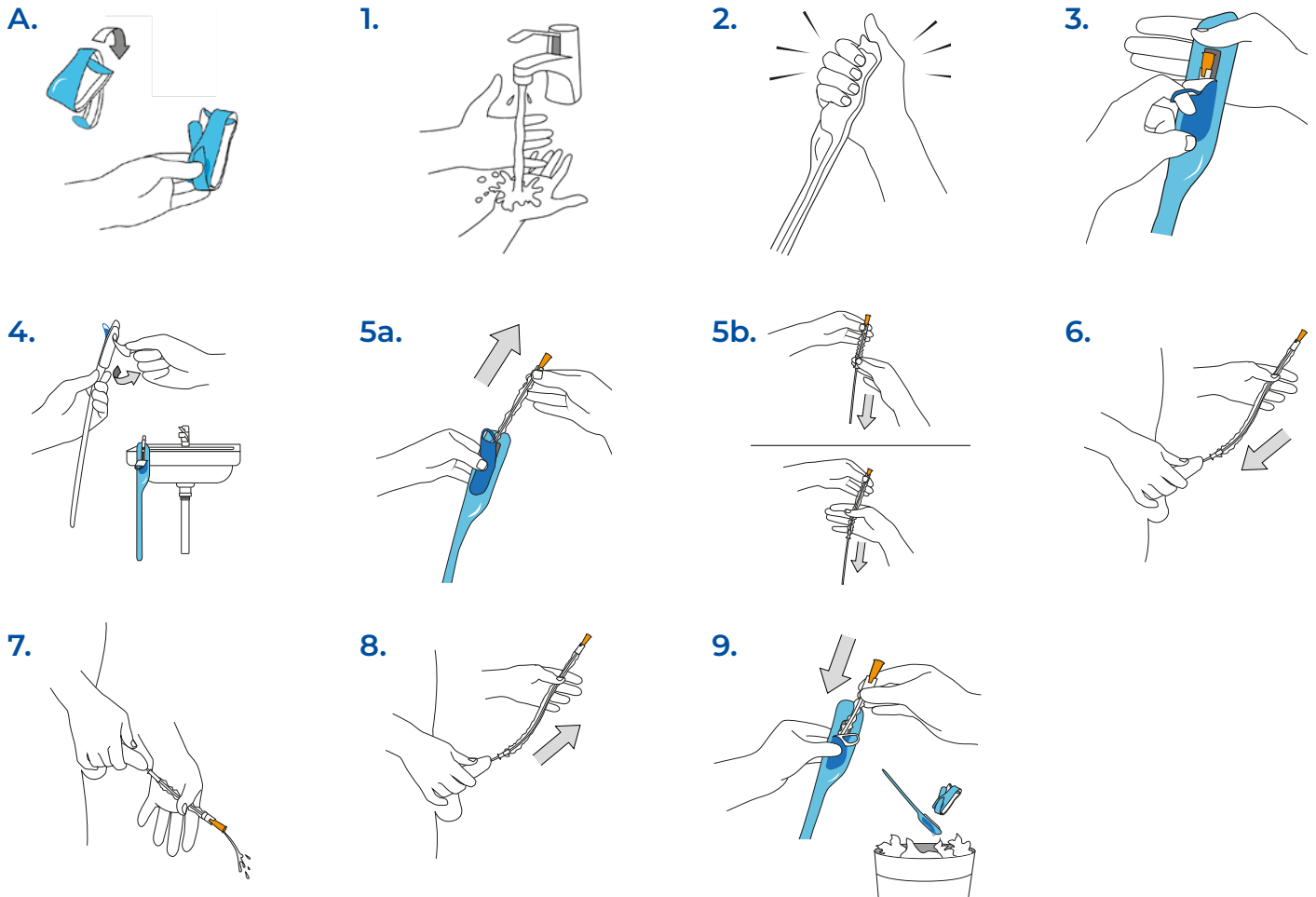

A. Tips voor het bewaren vóór gebruik. Oprolbaar tot zakformaat. Gebruik de inkeping om de katheter opgerold te laten.

1. Was uw handen grondig met water en zeep.
2. Knijp om de zoutwateroplossing vrij te geven en de katheter is klaar voor gebruik.
3. Gebruik de lus om naar beneden te trekken en te openen.
4. Optioneel: gebruik de plakstrip aan de achterkant om het product aan een droog, schoon oppervlak te bevestigen.
5. A. Knijp na het openen voorzichtig in de kokergreep en houd deze vast om de beschermkoker automatisch naar beneden te trekken bij het verwijderen van de katheter. Gebruik de beschermkoker om het inbrengen te regelen zonder de katheterslang aan te raken.

B. OPTIONEEL: Haal de katheter uit de verpakking. Trek de kokergreep naar beneden om de katheterslang te bedekken. Gebruik de beschermhuls om het inbrengen te controleren zonder de katheterslang aan te raken.

6. Til de penis op in de richting van de buik om de plasbuis te strekken. Breng de katheter voorzichtig in de plasbuis in. Zodra de urine begint te stromen, brengt u de katheter iets verder in om een gelijkmatige straal te verkrijgen.
7. Buig de penis naar beneden wanneer de urine door de katheter begint te stromen.
8. Wacht tot de urinestraal stopt, zodat de blaas volledig geleegd wordt. Trek de katheter langzaam terug.
9. Plaats de katheter terug in de verpakking en gooi de katheter op de voorgeschreven manier weg (plaatselijke voorschriften kunnen verschillen).

BELANGRIJKE INFORMATIE

Gebruik uitsluitend de meegeleverde zoutwateroplossing om de katheter nat te maken.

Leg de katheter niet op een stuk papier of een doek omdat deze materialen water uit de coating kunnen absorberen.

Belangrijke informatie

LoFric[®] Origo[™] Pro, Hydrofiele katheter voor eenmalig gebruik, met zoutwateroplossing voor activering, met meerdere oogjes, ontworpen om de blaas volledig te legen zonder dat herpositionering nodig is.

Voor kort- of langdurende, intermitterende katheterisatie.

Voor volwassenen en adolescenten.

LoFric-katheters mogen alleen op voorschrift van een arts worden gebruikt.

Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik het advies en de training voor de katheterisatieprocedure van uw zorgverlener opvolgt.

Raadpleeg de in de verpakking bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor belangrijke informatie en volledige instructies.

Neem contact op met uw arts als u problemen ondervindt.

Bij Wellspect ontwikkelen we innovatieve producten en oplossingen die écht het verschil maken voor mensen met blaas- en darmproblemen, zodat zij elke dag volop kunnen leven. Al meer dan 40 jaar zijn wij een vertrouwde naam in de gezondheidszorg met onze productmerken LoFric[®] en Navina[™].

We blijven ons inzetten om onze gebruiksvriendelijke oplossingen voor steeds meer mensen beschikbaar te maken. Elke dag werken we aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en beperken we tegelijk de impact van onze producten op het milieu. Samen met gebruikers en zorgprofessionals verbeteren we klinische resultaten en de kwaliteit van leven van mensen over de hele wereld.

Wellspect. A Real Difference.

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en diensten: wellspect.nl

Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram.

wellspect.nl

Wellspect B.V., Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland. Tel NL: 079-363 70 10.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only