

Productomschrijving

LoFric Elle, Hydrofiele urine-katheter voor eenmalig gebruik, ontworpen voor vrouwelijke gebruikers.

Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door middel van straling. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

Verpakking

30 katheters per klantenverpakking.
2 klantenverpakkingen per verzendoos.

Samenstelling van het materiaal

Katheter:
Elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Oppervlaktecoating:
Polyvinyl pyrrolidone (PVP).


Bevochtigingsvloeistof:
Vloeistof op waterbasis met glycerol.

Primair verpakkingsmateriaal:
Polypropyleen.

Product range

Ref. nr.	Type	Lengte	Diktemaat
418 10 65	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 10
418 12 65	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 12
418 14 65	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 14
418 10 05	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 10 <small>Proefpakket</small>
418 12 05	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 12 <small>Proefpakket</small>
418 14 05	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 14 <small>Proefpakket</small>

*Effectieve lengte, lengte van de katheter die in de urethra kan worden ingebracht.

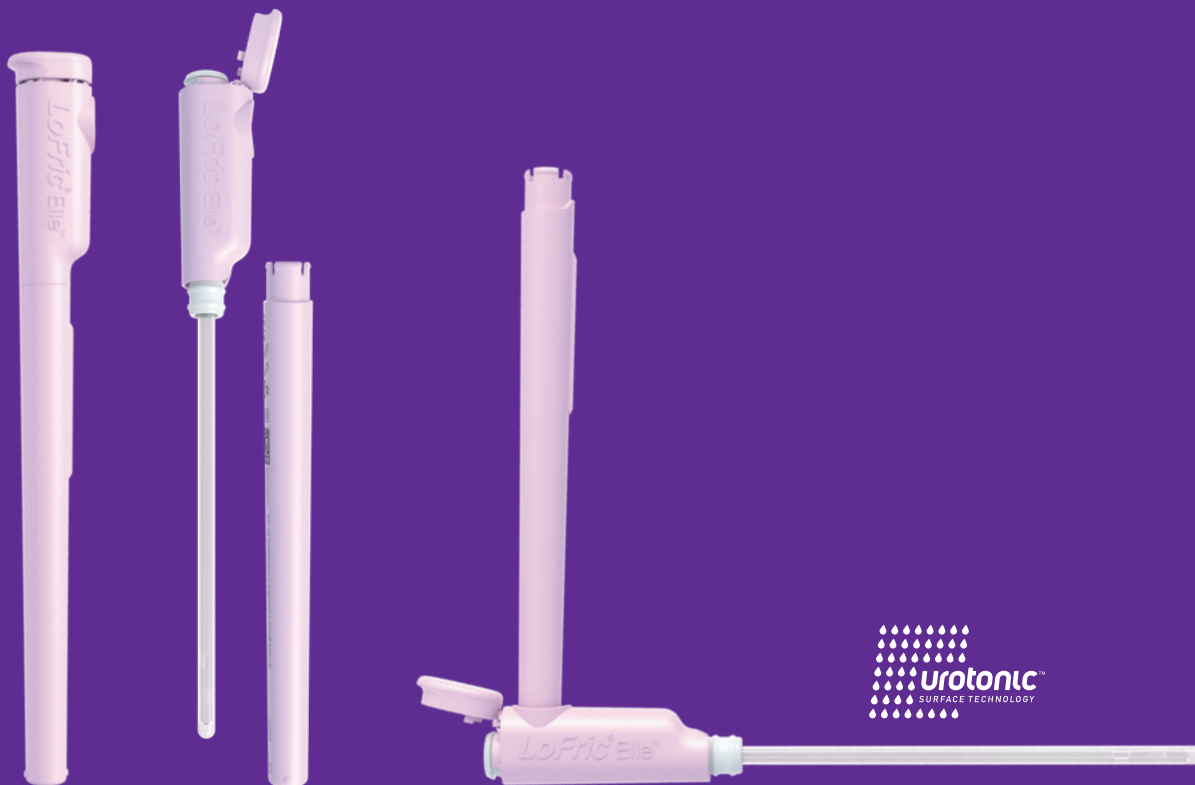

- Ontworpen om ergonomisch en gebruiksvriendelijk te zijn, met een L-vormig handvat – voor een goede grip en een non-touch techniek. Te koppelen met een standaard urineopvangzak of verlengslang.
- Direct klaar voor gebruik – Klaar zodra dat nodig is, voor een snelle handling en katheterisatie.
- Smal en discreet ontwerp.
- Onderste deel van plastic (polypropyleen) is geschikt voor recycling.
- Niet geproduceerd met pvc, ftalaten en latex.
- Gladde katheterogen.^{1,2}
- LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.^{3,4}

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018

3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Bij Wellspect ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor continenzorg die het leven van mensen veranderen. We zetten ons ervoor in onze gebruikers te inspireren om zelfvertrouwen en onafhankelijkheid op te bouwen, evenals een goede mate van gezondheid en welzijn. We zetten al meer dan 30 jaar de toon in onze branche met onze productmerken LoFric® en Navina™. We maken betrouwbare en gebruiksvriendelijke producten voor blaas- en darmmanagement met zo min mogelijk impact op het milieu. Vol passie streven we ernaar om klimaatneutraal te worden en we werken nauw samen met gebruikers en professionele zorgverleners die ons voortdurend inspireren om onze producten en diensten op een duurzame manier te verbeteren, nu en in de toekomst.

Wellspect. A real difference.

Voor meer informatie over onze producten en ons initiatief Advancing Continence Care Together (ACCT) kunt u terecht op [Wellspect.nl](https://www.wellspect.nl)

Praat mee op Facebook.

[wellspect.nl](https://www.wellspect.nl)

