

**LoFric® Origo™ Pro**, Hydrofiele katheter voor eenmalig gebruik, met zoutwateroplossing voor activering, met meerdere oogjes, ontworpen om de blaas volledig te legen zonder dat herpositionering nodig is.

#### Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door middel van straling.  
Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

#### Verpakking

30 katheters per klant verpakking.  
4 klant verpakkingen per verzenddoos.

5 katheters per proefpakket.

#### Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating:  
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Watersacht: Laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET), aluminium en polyethyleen (PE). Steriel water met natriumchloride (NaCl).

Sleeve: polyethyleen (PE)

Primair verpakkingsmateriaal:  
Bovenste folie: laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET) en polyethyleen (PE).

Onderste folie: polyolefine.


#### Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte	Aantal oogjes
441 12 00	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 12	12
441 14 00	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 14	12
441 16 00	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 16	12


\*LoFric Origo Pro heeft een sleeve, flexibele tip en meerdere oogjes.

Alle producten verkrijgbaar in proefpakket, 5 katheters. Om te bestellen vervangt u de laatste twee cijfers van het referentienummer door 05.

## LoFric Origo Pro

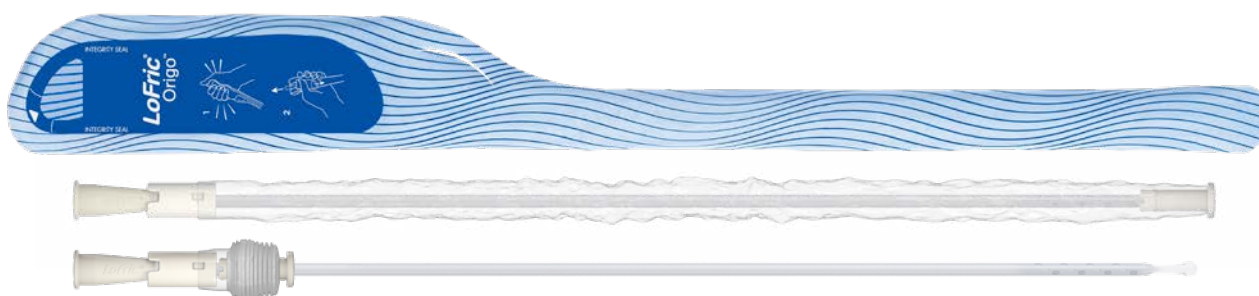

- **De meerdere oogjes van LoFric Origo Pro** zijn ontworpen om volledige blaaslediging mogelijk te maken zonder dat herpositionering nodig is.<sup>1</sup>
- **Lus in openingslabel.**
- **Kleefstrip op achterzijde** voor eenvoudig ophangen.
- **Directe activering:** wordt geleverd met steriele zoutoplossing; even knijpen en het is klaar voor gebruik.
- **Beschermende sleeve** voor uitstekende controle maakt een non-touch techniek mogelijk.
- **Gladde katheteroogjes.**
- **LoFric Origo-katheters zijn gecoat** met de Urotonic™ Surface Technology. De katheter blijft glad, zowel tijdens het inbrengen als tijdens het verwijderen.<sup>2,3,4</sup>
- **Niet geproduceerd met PVC, ftalaten of latex.**

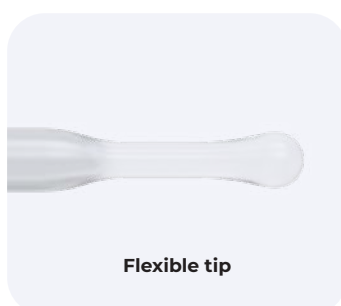

## Referenties

1. Data on file at info@wellspect.com.
2. Waller et al., 1997.
3. Lundgren et al., 2000;
4. Johansson et al., 2013

Bij Wellspect ontwikkelen we innovatieve producten en oplossingen die écht het verschil maken voor mensen met blaas- en darmproblemen, zodat zij elke dag volop kunnen leven. Al meer dan 40 jaar zijn wij een vertrouwde naam in de gezondheidszorg met onze productmerken LoFric®, Navina™ en Surity™. We blijven ons inzetten om onze gebruiksvriendelijke oplossingen voor steeds meer mensen beschikbaar te maken. Elke dag werken we aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en beperken we tegelijk de impact van onze producten op het milieu. Door nauw samen te werken met zorgprofessionals en mensen die op onze oplossingen vertrouwen, verbeteren we klinische resultaten en de kwaliteit van leven voor mensen over de hele wereld.

**Wellspect. A Real Difference.**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en diensten: [wellspect.nl](https://wellspect.nl)

Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram.

[wellspect.nl](https://wellspect.nl)

Wellspect B.V., Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland. Tel NL: 079-363 70 10.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only